

往診の際も使いやすい胃瘻カテーテル交換用キット

胃瘻クリニカルキット

医療機器認証番号 220AABZX00342000

ガイドワイヤーでさらなる安全と安心を



胃瘻クニカルキット

医療機器認証番号 220AABZX00342000




準備する手間を省きます

カテーテル交換に必要な手袋や潤滑剤、ガーゼなども一緒にトレイに収めた、扱いやすい胃瘻交換用キットです。

挿入性向上のためのフラット構造

チューブとバルーン部分の段差を無くしたフラット構造で挿入抵抗が低減したことにより、交換に伴う患者様の負担が軽減されます。

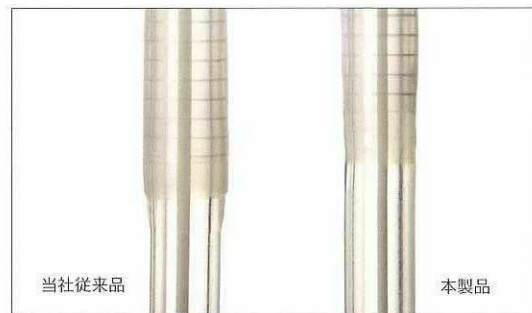

カテーテルの先端突出を無くしたバルーン形状



特殊な形状加工により、先端突出が無いバルーン形状を実現しました。先端が胃後壁に触れにくく、接触性潰瘍のリスクを軽減します。

より安全でスムーズなカテーテル交換を目指して

交換の際、腹腔内へのカテーテル誤挿入のリスクを低減するために、ガイドワイヤーをキットに添付しました。

付属のカテーテルチップシリンジを使用することで、カテーテルの先端が胃内に留置されていることの確認が行えます。

コシのある0.052"のガイドワイヤー



カテーテルへの追従性と胃内への穿刺リスク等を考慮した、先端柔軟性に優れたガイドワイヤーです。


- 全長600mm 外径1.32mm(0.052")
- 固定式ストレート(先端軟化型)
- 先端から100mm間隔のデプスマーク

胃内留置を確認するカテーテルチップシリンジ

カテーテルの先端が胃内に留置されていることを確認するための、カテーテルチップシリンジもキットに添付されました。



従来に比べて大容量になったバルーン

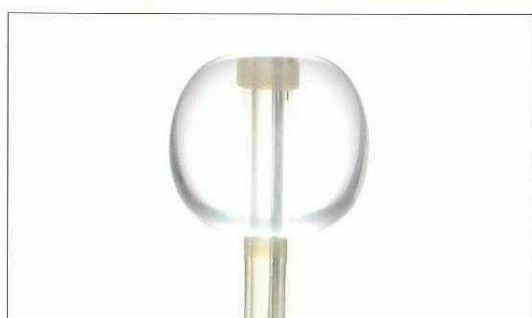

当社従来品と比較して、バルーン容量が多くなりました。

キット内容



- ①カテーテル
- ②ガイドワイヤー
- ③PEGキット(綿棒、ガーゼ、Yカットガーゼ)
- ④カテーテルチップシリンジ
- ⑤滅菌済精製水入りバルーン拡張器
- ⑥バルーン拡張器(抜水用)
- ⑦潤滑剤
- ⑧手袋

※交換の方法や管理について記載したマニュアルもキットに含まれます。

製品規格

胃瘻クリニカルキット

品目コード	サイズ呼称	規定容量	全長(mm)	JANコード
8000010325	12Fr	10mL	225	4542187164459
8000010326	14Fr	10mL	225	4542187164466
8000010327	16Fr	10mL	225	4542187164473
8000010328	18Fr	15mL	225	4542187164480
8000010329	20Fr	15mL	225	4542187164497
8000010330	22Fr	20mL	225	4542187164503
8000010331	24Fr	20mL	225	4542187164510

仕様	カテーテル	・X線造影ライン	・先端開孔	・バルーン後端から20~100mmまで10mm間隔のデプスマーク
	ガイドワイヤー	・全長600mm	・外径1.32mm(0.052")	・固定式ストレート(先端軟化型)
包装	・1キット/箱		・滅菌済	

弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。

ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。

営業所一覧

札幌営業所	TEL:011(727)5611	FAX:011(727)8990	盛岡出張所	TEL:019(606)1020	FAX:019(606)1022
仙台営業所	TEL:022(234)2541	FAX:022(234)2530	さいたま営業所	TEL:048(640)6161	FAX:048(640)6162
東京営業所	TEL:03(3815)7861	FAX:03(3815)7943	千葉出張所	TEL:04(7141)2945	FAX:04(7141)2946
横浜営業所	TEL:045(943)2617	FAX:045(943)2618	名古屋営業所	TEL:052(238)5670	FAX:052(241)5033
金沢出張所	TEL:076(260)1085	FAX:076(260)1086	大阪営業所	TEL:06(6944)0401	FAX:06(6944)0400
神戸営業所	TEL:078(341)0488	FAX:078(341)0487	広島営業所	TEL:082(261)5401	FAX:082(261)5402
福岡営業所	TEL:092(474)9911	FAX:092(474)9912	鹿児島出張所	TEL:099(250)6391	FAX:099(250)6392

製造販売元 クリエイトメディック株式会社
本社 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25

<http://www.createmedic.co.jp>