

New!!

ティアレ  
TIERRETT

シンプルな構造で  
“トラブルを防ぐ”  
をコンセプトに開発

# ティアレ 尿管バイパスチューブ (ソフトタイプ)

動物用医療機器届出番号：元動薬第447号

本品は、腎臓及び膀胱に留置し、  
尿管の排尿機能を補助するチューブです。

## 製品仕様

サイズ呼称	先端長	有効長	外径	内径	先端側孔	品目コード	JANコード
8.5Fr	猫用	35mm	2.8mm	1.9mm	3穴	800-001-7154	4542187228205
	犬用	40mm				800-001-7155	4542187228212
10Fr	猫用	35mm	3.3mm	2.1mm		800-001-7152	4542187228182
	犬用	40mm				800-001-7153	4542187228199

1本/箱・EOG滅菌済

☘ 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。  
☘ ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。


# 製品特長

## 〈尿路を安全に確保し続ける5つの工夫〉

- ①腎盂挿入部は予め曲げ加工を施したL字型で、折れ曲がりによる内腔閉塞を予防します。
- ②ループ形状が体動を吸収し、腎盂、膀胱の縫合部など局所への負荷を軽減、チューブ脱落を予防します。
- ③太いチューブ（8.5Fr：内径1.9mm、10Fr：内径2.1mm）で、つまりを予防します。
- ④接合部がない構造で、尿が滞留する部分がありません。
- ⑤体外からのアクセスが無いいため感染のリスクが少ない仕様です。

● L字型で、内腔閉塞を予防


● 体の伸び縮みを吸収して、  
負荷を軽減

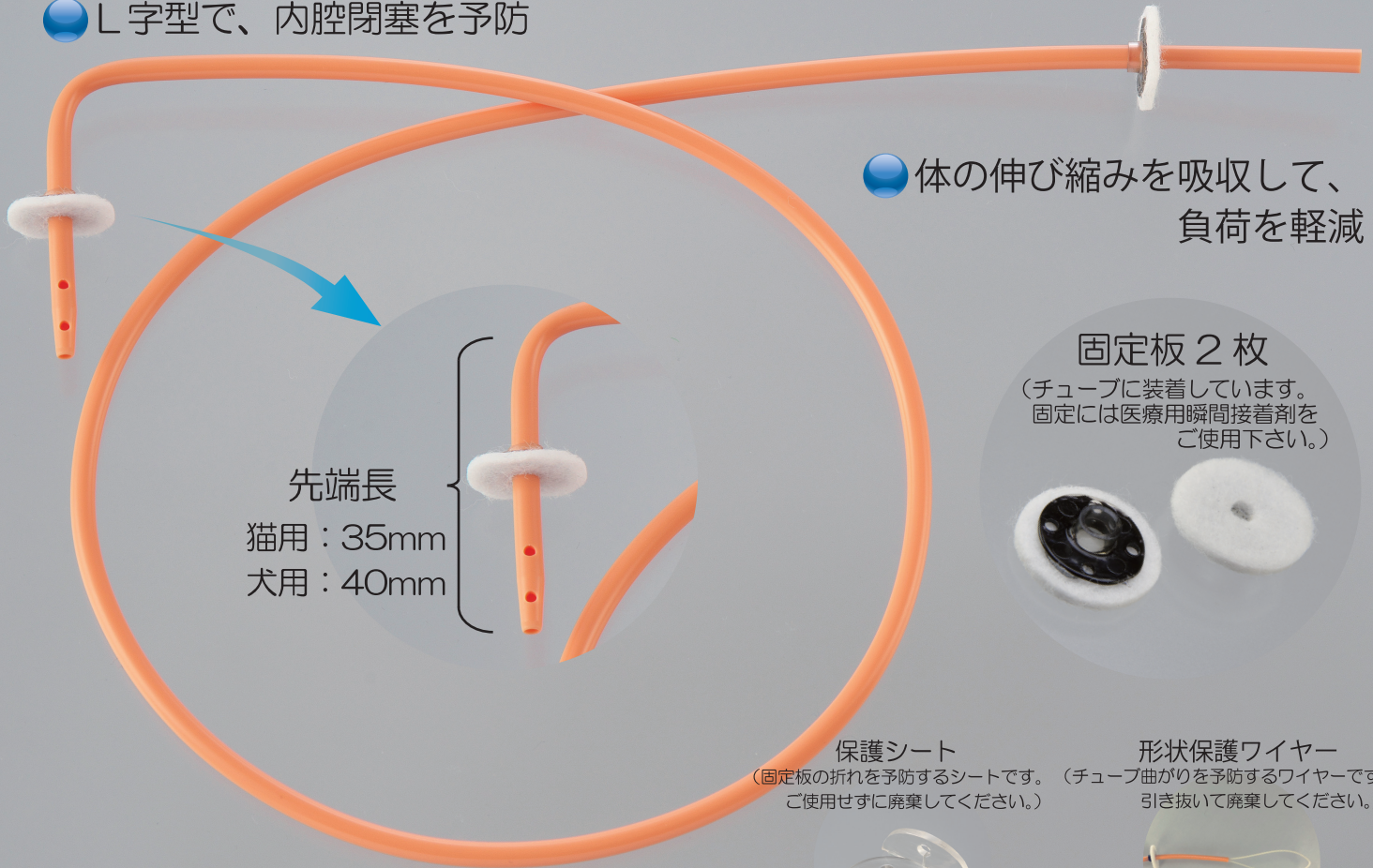

先端長  
猫用：35mm  
犬用：40mm

固定板 2枚

(チューブに装着しています。  
固定には医療用瞬間接着剤を  
ご使用下さい。)

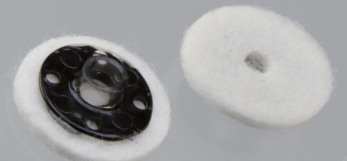

保護シート

(固定板の折れを予防するシートです。  
ご使用せずに廃棄してください。)



形状保護ワイヤー

(チューブ曲がりやを予防するワイヤーです。  
引き抜いて廃棄してください。)



クリエートメディック株式会社

<https://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物医療推進部 北海道  
水戸

TEL(0126)51-1104

FAX(0126)51-1105

TEL(029)243-9411

FAX(029)244-2070

E-mail : oem-infoch@createmedic.co.jp



【本 社】 横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-5-25

管理 No.01-0447-20210624