

# クリニー ER システム

(ERBD キット)

医療機器承認番号 16200BZZ00413000

4種類の長さのチューブステント（ポリエチレン製）、ガイドワイヤー付きダイレートカテーテル（テフロン製）及びプッシャーチューブ（ポリエチレン製）がセットされた、便利で使い易い内視鏡的逆行性胆汁ドレナージキットです。

## 特長と利点

### 1. ポリエチレン製ステント

適度の柔軟性を持ち、キンクしにくい材質で、かつ滑性にすぐれています。

### 2. 大口径チューブ


Thin Wall 加工で内腔がひろいので、十二指腸への胆汁流出が効率よくおこなえます。

### 3. 留置の確実なフラップ

両端近くに刻まれたフラップが、閉塞部や狭窄部を通過すると自然に開き、チューブの十二指腸内への逸脱を防止します。

### 4. 挿入操作の楽なキット

ステントをはじめ、ガイドワイヤー付ダイレートカテーテル及び、プッシャーチューブは滑性にすぐれ、サイズの整合性も良好です。

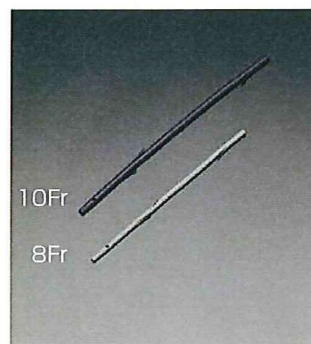

## 規格

### ERBD キット

品目コード	002 200 0080	002 200 0100
JAN コード	4542187004496	4542187004502
チューブサイズ	8Fr	10Fr
カテーテルカラー	ライトブルー	パープル
内径 × 外径	2.1mm×2.7mm	2.5mm×3.3mm
ステント全長 {有効長} (計4本入)	L- 96mm (L- 50mm) (1本) L- 121mm (L- 75mm) (1本) L- 146mm (L- 100mm) (1本) L- 171mm (L- 125mm) (1本)	
ガイドワイヤーサイズ	0.97mm (0.038")	
ガイドワイヤー全長	3,500mm	
ダイレートカテーテル サイズ	5Fr	
ダイレートカテーテル 全長	3,200mm	
プッシャーチューブ サイズ	8Fr	10Fr
プッシャーチューブ 全長	1,700mm	

包装：1キット/箱・滅菌済

\* 「本品をご使用になられる前に、ステント、ダイレートカテーテル、プッシャーチューブが内視鏡鉗子口を通過可能であることをご確認の上、ご使用ください。」

## 受注生産品

ER システム (ERBD キット) の単品製品は受注生産にて承ります。下記の規格表を御参照下さい。尚、本製品は受注生産の為、相応の納期がかかりますのであらかじめ御承お願致します。

### ER システム (ERBD キットステントチューブ単品)

医療機器承認番号 16200BZZ00413000

品目コード	サイズ(内径×外径 mm)	有効長	全長	JANコード
● 002 206 0810	8Fr (2.1×2.7)	50mm	96mm	4542187004564
● 002 206 0820		75mm	121mm	4542187004571
● 002 206 0830		100mm	146mm	4542187004588

※対応ガイドワイヤー：0.97mm (0.038") 包装：3本/箱・1本毎滅菌済

● 印は受注生産品です

# クリニー ER システム

(N-B ドレナージチューブ)  
医療機器承認番号 16200BZZ00413000

内視鏡を用いて逆行性に挿入し、経鼻的に留置する胆汁ドレナージチューブ（ポリエチレン製）で、四種類の先端形状のうちから留置部位に最も適したものを選択していただくことができます。

## 特長と利点

### 1. ポリエチレン製ドレナージチューブ


丈夫でキンクしにくい材質なので閉塞部や狭窄部を楽に通過させることができます。また、適度の柔軟性を持っており、留置中の苦痛や違和感が少なくてすみます。

### 2. 四種類の先端形状

あらかじめ成形された四種類の先端形状の中から、症例に応じ最適なものを選択できます。また形状の保持能力にすぐれており、留置部位に応じてカテーテルを固定できます。

### 3. 広い内腔と大きな側孔

0.97mm (0.038") ガイドワイヤーを通過させることができ、胆汁の排出も効率よくおこなえます。大きく滑らかに仕上げられた側孔は、内腔閉塞の防止に有効です。

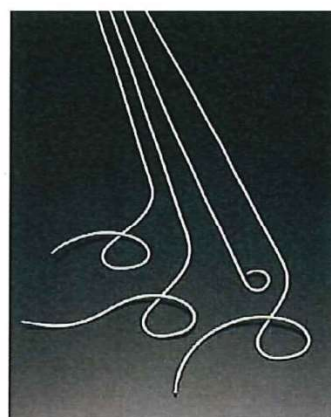


## 規 格

### N-B ドレナージチューブ

品目コード	タイプ	適 用	サイズ	側 孔	JAN コード
002 201 0070	ビッグテール型	胆管留置用	カテーテル：7Fr	ループ部 6孔	4542187004526
002 202 0070	<i>a</i> 型	下部総胆管留置用	外径：2.4mm	先端部 4孔	4542187004533
002 203 0070	ロング <i>a</i> 型	右肝管留置用	内径：1.5mm		4542187004540
002 204 0070	逆ロング <i>a</i> 型	左肝管留置用	全長：2,500mm		4542187004557

包装：2本/箱・滅菌済

- 当社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。

 クリエイトメディック株式会社

本社 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25  
ホームページ <http://www.createmedic.co.jp>

