

ディスポーザブル穿刺針

スポットニードル

使用目的

肝癌などに対する超音波誘導下経皮的薬液注入

保 険

材料費：請求不可

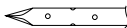
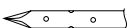


特長と利点

1. 放射状に注入しやすい4方向に開いた側孔
2. 直進性に優れた独自の三角刃形状
3. 超音波画像で明瞭に確認できる針先端部
4. 注入孔からの異物の進入を防ぐスタイレット付
5. 先端より2cm～19cm迄1cm間隔で目盛り付き（5cm間隔で太線入り）
6. エクステンションチューブ付き

規 格

スポットニードル

品目コード	サイズ呼称	先端形状	側 孔	有効長	固定針 外径・内径 有効長
003 401 0100	21G S-10		先端から 10mm までに 6穴	200mm	1.06-0.86mm (19G) L-75mm
003 402 0070	22G S-7		先端から 7mm までに 6穴		

包装：5 セット／箱・滅菌済