

### クリニー抗菌フォーリーカテーテル

[医療機器承認番号：30500BZX00280000]



品目コード	サイズ呼称	バルーン容量	バルブカラー	JAN コード
8000017145	12Fr	10mL	ホワイト	4542187228113
8000017146	14Fr		グリーン	4542187228120
8000017147	16Fr		オレンジ	4542187228137
8000017148	18Fr		レッド	4542187228144
8000017149	20Fr		イエロー	4542187228151
8000017150	22Fr		バイオレット	4542187228168
8000017151	24Fr		ブルー	4542187228175

カテーテルサイズ全長 430mm 包装：10本/箱・滅菌済

### クリニー抗菌フォーリートレイキット

[医療機器承認番号：30600BZX00120000]



品目コード	サイズ呼称	バルーン容量	採尿バッグ容量	バルブカラー	JAN コード
8000020082	12Fr	10mL	2000mL	ホワイト	4542187240740
8000020083	14Fr			グリーン	4542187240757
8000020084	16Fr			オレンジ	4542187240764
8000020085	18Fr			レッド	4542187240771
8000020086	20Fr			イエロー	4542187240788
8000020087	22Fr			バイオレット	4542187240795
8000020088	24Fr			ブルー	4542187240801

カテーテルサイズ全長 430mm 包装：10キット/箱・滅菌済

キット内容

- 抗菌フォーリーカテーテル
- 採尿バッグ(容量 2000mL)
- ペンザルコニウム塩化物消毒液 0.025%[ヨシダ]
- ・ 手袋 ・ 綿棒3本 ・ ガーゼ2枚 ・ 敷布2枚
- ・ 滅菌水入りバルーン拡張器
- ・ 潤滑ゼリー

弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。  
 ご使用にあたっては、必ず電子添付文をご一読ください。

NEW

## All-Silicone Foley Catheter Series

# クリニー抗菌フォーリーカテーテル

クリニーから、抗菌剤(銀)を含有させたシリコン製フォーリーカテーテルが新登場





抗菌

# Foley Catheter

## 抗菌性 NEW

カテーテルチューブに抗菌剤(銀)を含有させた抗菌フォーリーカテーテルです。抗菌力試験<sup>\*1</sup>にて、大腸菌、緑膿菌、MRSA、黄色ブドウ球菌に対して、抗菌活性値2.0以上であり、これらの菌種に対し、抗菌性を確認しております。

## シリコーン製



生体適合性に優れており、尿道粘膜への刺激が少なくラテックスアレルギーの心配もありません。

## 広い内腔



内腔が広いので流量を確保できます。

## 挿入性・柔軟性

バルーンは柔軟性が高いので、膀胱にやさしく、チューブは適度なコシを有しているため、挿入性にも優れています。


## クリニー抗菌フォーリートレイキット

抗菌剤(銀)が含有されたシリコーン製フォーリーカテーテルと便利な処置具を無菌的にセットした、より安心なラテックスフリーのトレイキットです。

ラテックスフリー

### 採尿バッグ (容量 2000mL)

天地幅が短く低床ベッドに使用しても床に触れにくく衛生的に使用できます

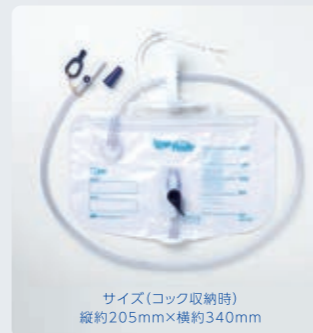

サイズ(コック収納時)  
縦約205mm×横約340mm

### 消毒液

刺激性の少ない  
ベンザルコニウム塩化物消毒液  
0.025%「ヨシダ」



### 処置具

ラテックスアレルギーに  
配慮されたキット内容



トレイ内容



2500mL

2000mL




針が不要なニードルレスサンプルポート



片手で容易に排尿可能なコックハンドル

### 各種細菌に対する殺菌効果

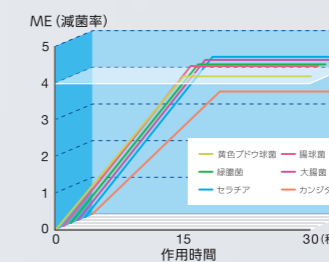

### 早い殺菌効果

ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025%「ヨシダ」は、表記菌種に対し15秒の作用で殺菌効果を示しました。(カンジダには減菌率99.9%以上 (ME>3)、それ以外の菌種には減菌率99.99%以上 (ME>4))

### 低刺激性

粘膜に対する刺激性が低く、低濃度で効果を発揮します。

### 無色・透明

衣服や下着に付着しても、汚れが目立ちません。

### ① ベンザルコニウム塩化物消毒液 0.025%「ヨシダ」

容量30mLの滅菌製剤です。

### ② 手袋

ニトリルゴム製なのでラテックスアレルギーの心配がありません。

### ③ 綿棒3本

綿球をピンセットでつまむ必要が無いので、操作性が高く、簡便に手技ができます。

### ④ 滅菌水入りバルーン拡張器

予め滅菌水が充填されているので準備の手間がならず、看護業務の効率化が図れます。

### ⑤ 敷布2枚

敷布は片面撥水コーティングが施されています。

### ⑥ ガーゼ2枚

サイズ280×160mmと充分な大きさです。

### ⑦ 潤滑ゼリー

扱いやすい水溶性潤滑ゼリーです。カテーテルの挿入性を向上させます。

(※1) JIS Z 2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法-抗菌効果」 5. 試験方法による抗菌力試験