


バーセル

脊髄空洞症用シャントチューブ

(北大式サッポロシャント)

医療機器承認番号16300BZZ01285000

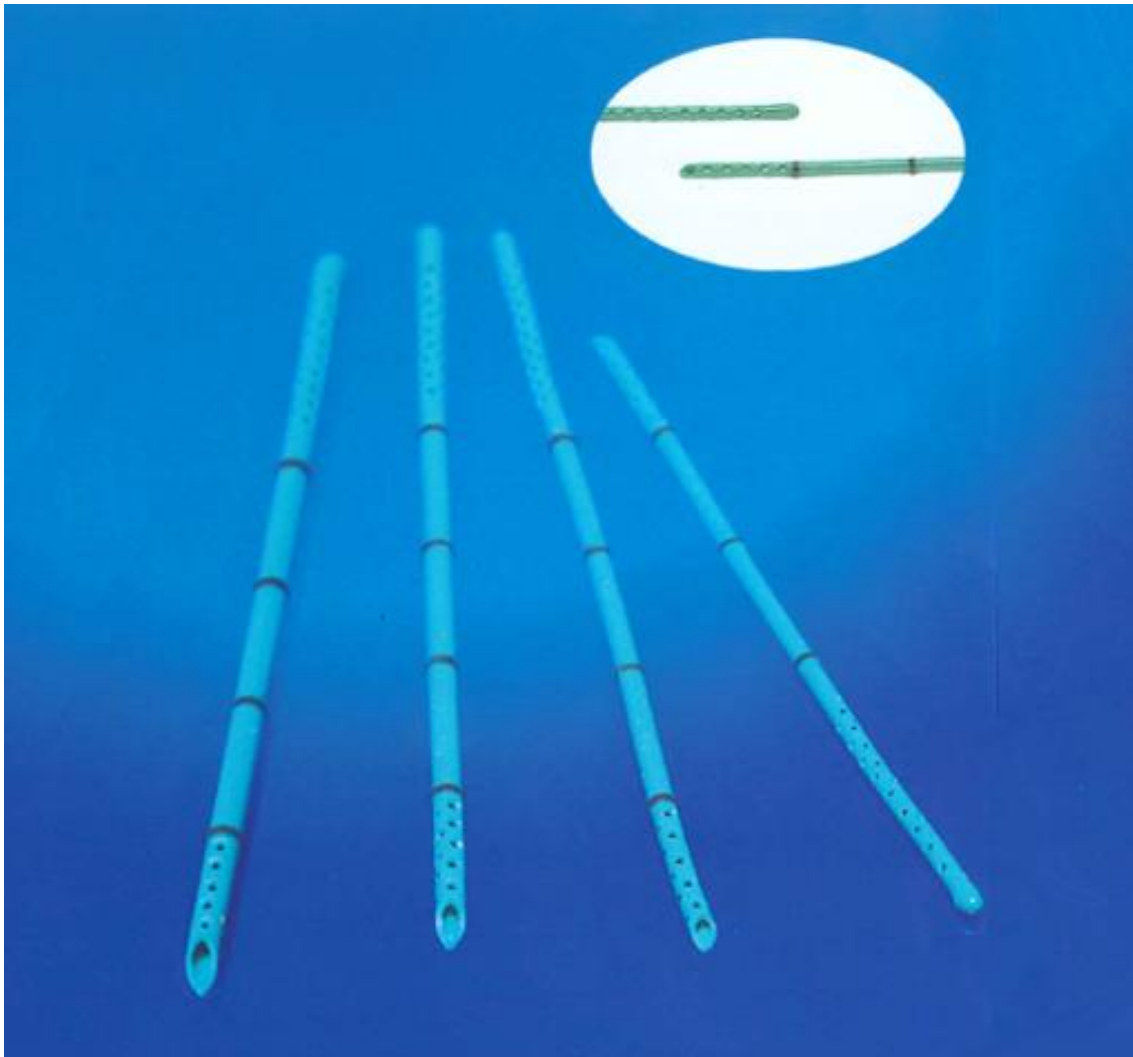

BIRTHEL

*Syringosubarachnoid Shunt Tube
for
Syringomyelia*



CREATE MEDIC CO.,LTD.

脊髄空洞症用シャントチューブ

適 応 症

脊髄空洞症 特に Chiari 奇形合併例及び特発例。

特長と利点

1. オールシリコン製

安定した材質で、生体組織への刺激が少なく、髄液などによって変質・劣化することもほとんどありません。

2. 広い内腔と多数の側孔


髄液の取り込みが良好で、豊富な流量が確保できます。
また撥水性にすぐれているので、内腔閉塞の危険性低減が期待できます。

3. 適度の柔軟性となめらかな仕上げ

挿入が容易で、無用な組織損傷を避けることができます。

4. 全造影タイプ

X線不透過性に優れているので、留置状態が把握できます。

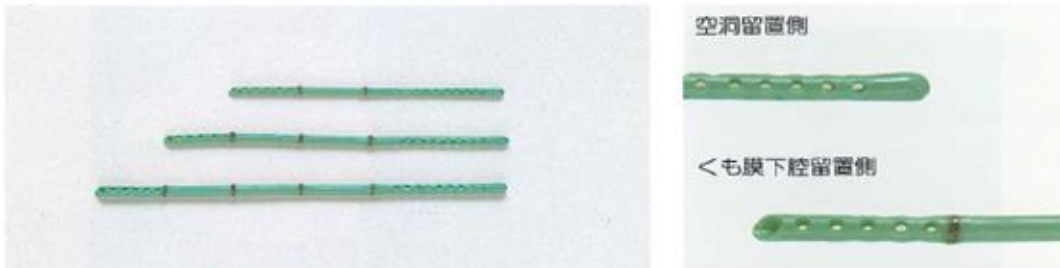

規 格

品目コード	外径-内径	全長	JANコード
015-340-1040	1.0 - 0.6 mm	40 mm	4542187011630
015-340-1240	1.2 - 0.7 mm		4542187011685
015-340-1250		50 mm	4542187011692
015-340-1260		60 mm	4542187011708
015-340-1440	1.4 - 0.9 mm	40 mm	4542187011739
015-340-1450		50 mm	4542187011746
015-340-1460		60 mm	4542187011753

包装 : 1本/箱・滅菌済

- 空洞留置側 20mm から 10mm間隔でリングデプスマーク付き。
- 空洞留置側 36 孔、クモ膜下腔留置側 20 孔、X線全造影のオールシリコン製。

- 弊社では常に研究開発をおこなっておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
- ご使用にあたっては、必ず電子添文をご一読ください。



クリエートメディック株式会社

本社 横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-5-25
ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>