


クリニー トラキオストミーチューブ

一重管 / 二重管



気管にやさしい
気管切開
チューブ

- 当社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品の仕様を一部変更する場合があります。予めご了承ください。
- ご使用に際しては、必ず電子添文をご一読ください。
- イラストはイメージ図であり、製品と異なる部分があります。ご了承ください。

 クリエイトメディック株式会社

ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>

「やさしさ」と「性能」へのこだわり

ポリ塩化ビニルよりも柔らかい シリコーンゴムで出来た気管切開チューブ

柔軟で気管にやさしく、かつ耐キック性に優れたカニューレチューブを
2種類のシリコーンが可能にしました。



ネックプレート

頸部への違和感・負担を軽減させるため、
柔軟なシリコーン素材を使用。

サククションチューブ(カフ上部吸引機能)



- 効果的な吸引効率を実現
- 気管に接触して吸引口が塞がれないよう
背面より、やや側面に設置
- 吸引口をカフ上部に近づけたことにより、
吸引効率を向上

人工呼吸器関連肺炎(VAP)と上部吸引機能の優位性について

カフ部の上部吸引機能が付いている事で、カフ部上部に溜まっている分泌液を吸引することが出来ます。それにより気管を清潔に保つ事が可能です。また、下気道への細菌の侵入を防ぐ事でVAP発症率の軽減に繋がります。



二重管

インナーカニューレのみを取り出し内腔に付着した分泌物を除去できるため、
分泌物が多くチューブ内腔が閉塞しやすい患者、気管切開の期間が長い患者に
有用と言われております。

インナーカニューレについて

- カニューレチューブの柔らかさを活かすため、
屈曲部に蛇腹タイプのインナーカニューレを採用。
- インナーカニューレの視認性向上のため、
キャップにネックプレートと同じ淡い黄色を配色。
- 挿入性向上のため、キャップ側にストレート部を設けて
挿入時の変形を防止。
- ストレート部にサイズ表記。
(outer表示がカニューレチューブ内径に合致します。)



2

種類の
シリコーンを
採用

カニューレチューブ

コシのあるシリコーン

頸部の屈曲等による、キックを軽減するため、
コシのある適度な硬さのシリコーン素材を使用。

柔軟なシリコーン

気管への負担を低減するため、
柔軟でシワの出来にくいシリコーン素材を使用。

『LEAK BLOCK』により、
カフのエアホールド力を追求し、
気体透過性を低く設計しています。

LEAK BLOCK エア注入による
カフ部の経時変化

経過時間 (h)	LEAK BLOCK (シリコーン製) カフ外径 (%)	A社 (シリコーン製) カフ外径 (%)
0	100.00	100.00
3	98.00	95.00
6	96.00	90.00
12	94.00	88.00
15	93.50	87.00
18	93.00	86.00
24	93.49	85.65

※当比較試験は当社試験になります。スタート時(0時間)にカフの内圧が、50mmHgになるまでカフを膨らませます。
その後、設定した測定時間毎にカフの外径を測定し、経過時間に対するカフ外径の測定値を比較しました。

クリニー トラキオストミーチューブ

一重管



規格

クリニー トラキオストミーチューブ (カフ付き・上部吸引あり)

医療機器認証番号:222AABZX00094000



品目コード	内径(mm)	外径(mm)	長さ(mm)	JANコード
800 001 0985	5.0	7.3	57.0	4542187169829
800 001 0986	6.0	8.7	63.0	4542187169836
800 001 0987	7.0	10.0	71.0	4542187169843
800 001 1578	7.5	10.7	73.0	4542187172409
800 001 0988	8.0	11.0	75.0	4542187169850
800 001 1579	8.5	11.7	78.0	4542187172416
800 001 0989	9.0	12.3	80.0	4542187169867
800 001 0990	9.5	13.3	83.0	4542187169874

5本/箱・EOG滅菌済

クリニー トラキオストミーチューブ (カフ付き・上部吸引なし)

医療機器認証番号:222AABZX00094000



品目コード	内径(mm)	外径(mm)	長さ(mm)	JANコード
800 001 2520	5.0	7.3	57.0	4542187181937
800 001 2521	6.0	8.7	63.0	4542187181944
800 001 2522	7.0	10.0	71.0	4542187181951
800 001 2523	7.5	10.7	73.0	4542187181968
800 001 2524	8.0	11.0	75.0	4542187181975
800 001 2525	8.5	11.7	78.0	4542187181982
800 001 2526	9.0	12.3	80.0	4542187181999
800 001 2527	9.5	13.3	83.0	4542187182002

5本/箱・EOG滅菌済

クリニー トラキオストミーチューブ (カフなし)

医療機器認証番号:222AABZX00094000



品目コード	内径(mm)	外径(mm)	長さ(mm)	JANコード
800 001 2512	5.0	7.3	57.0	4542187181852
800 001 2513	6.0	8.7	63.0	4542187181869
800 001 2514	7.0	10.0	71.0	4542187181876
800 001 2515	7.5	10.7	73.0	4542187181883
800 001 2516	8.0	11.0	75.0	4542187181890
800 001 2517	8.5	11.7	78.0	4542187181906
800 001 2518	9.0	12.3	80.0	4542187181913

5本/箱・EOG滅菌済

付属品
衛材セット



カットガーゼ
パッドA



カットガーゼ
パッドB



布テープ
(頸部固定テープ)

クリニー トラキオストミーチューブ

二重管



規格

クリニー トラキオストミーチューブ (二重管 カフ付き・上部吸引あり)

医療機器認証番号:222AABZX00094000



品目コード	気管切開チューブ			インナーカニューレ 内径(mm)	JANコード
	内径(mm)	外径(mm)	長さ(mm)		
800 001 5870	7.0	10.0	71.0	5.5	4542187215335
800 001 5871	7.5	10.7	73.0	6.0	4542187215342
800 001 5872	8.0	11.0	75.0	6.5	4542187215359
800 001 5873	8.5	11.7	78.0	7.0	4542187215366
800 001 5874	9.0	12.3	80.0	7.5	4542187215373

5本/箱・EOG滅菌済

クリニー トラキオストミーチューブ (二重管 カフなし)

医療機器認証番号:222AABZX00094000



品目コード	気管切開チューブ			インナーカニューレ 内径(mm)	JANコード
	内径(mm)	外径(mm)	長さ(mm)		
800 001 5858	7.0	10.0	71.0	5.5	4542187215212
800 001 5859	7.5	10.7	73.0	6.0	4542187215229
800 001 5860	8.0	11.0	75.0	6.5	4542187215236
800 001 5861	8.5	11.7	78.0	7.0	4542187215243
800 001 5862	9.0	12.3	80.0	7.5	4542187215250

5本/箱・EOG滅菌済

クリニー トラキオストミーチューブ (インナーカニューレ)

医療機器認証番号:222AABZX00094000



品目コード	呼称	内径(mm)	有効長(mm)	JANコード
800 001 5864	7.0用	5.5	102.5	4542187215274
800 001 5865	7.5用	6.0	104.5	4542187215281
800 001 5866	8.0用	6.5	106.5	4542187215298
800 001 5867	8.5用	7.0	109.5	4542187215304
800 001 5868	9.0用	7.5	111.5	4542187215311

5本/箱・EOG滅菌済

付属品
衛材セット



カットガーゼ
パッドA



カットガーゼ
パッドB



布テープ
(頸部固定テープ)

クリニー トラキオストミーチューブ 関連製品

雑品

クリニー トラキガード
(気管切開チューブ固定ホルダー)



品目コード	規格	JANコード
800 001 6585	45.0cm×3.5cm	4580341153109

20個/箱・未滅菌

雑品

クリニー トラキオストミーチューブ用
ネックホルダー



品目コード	サイズ呼称	長さ(cm)	幅(cm)	JANコード
800 001 3162	S	23	3	4580341153017
800 001 3163	M	47	3	4580341153024
800 001 3164	L	60	3	4580341153031


12個/箱・未滅菌

特長と利点




- 01 気管切開チューブのコネクタ部をOリングで抑えてチューブの飛び出しを防ぎます。
- 02 呼吸回路のコネクタ部をマジックテープが固定してコネクタの脱落を防ぎます。
- 03 首回り18cmから46cmまで適応でき、全ての気管切開チューブにご利用いただけます。
- 04 1患者につき、1回使用の Disposable 商品です。
- 05 呼吸回路をネックホルダーに固定しますので、回路に加わった力をネックホルダーに逃がします。


使用方法

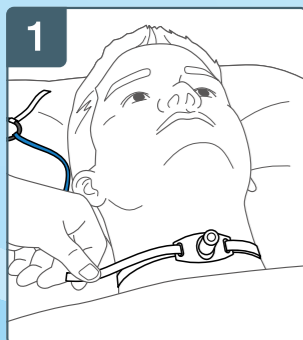

1
ネックホルダーで
チューブを固定します。

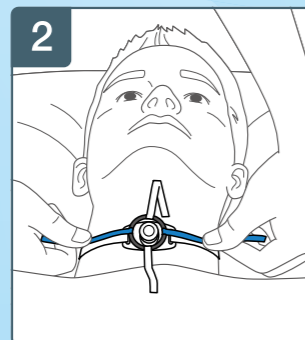

2
Oリングで
チューブを抑えます。

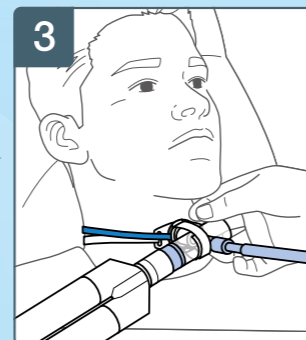

3
マジックテープで
回路を固定します。



QRコードから、
使用方法の動画を
ご覧いただけます。

気管切開チューブ (B型)

綿テープ、ガーゼ付属

医療機器承認番号: 15900BZZ00179000



品目コード	呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	カニューレ長 (mm)	JANコード
004 020 0050	22Fr	5.0	7.3	59	4542187008357
004 020 0060	26Fr	6.0	8.7	70	4542187008364
004 020 0070	30Fr	7.0	10.0	75	4542187008371
004 020 0080	33Fr	8.0	11.0	81	4542187008388
004 020 0090	37Fr	9.0	12.3	92	4542187008395

5本/箱・EOG滅菌済