

クリニーレッグバッグ

クリニーレッグバッグが、より機能的に生まれ変わりました。

チューブ長の調整が可能


インレットチューブをカットすることで、好みの長さに調整できます。

※インレットチューブ長 500mm

1枚ごとに固定用ベルトをセット化

レッグバッグ1枚ごとに固定用ベルトが付属されておりますので、便利に、衛生的にご使用いただけます。また、太いベルト（ボタン付固定用ベルト）も付属されており、好みのベルトを選択できます。

※ボタン付固定用ベルトは1箱につき1セット付。（別売りもあります）

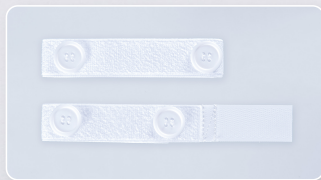

開閉しやすい排尿コック

排尿口はコックハンドル式なので、片手で容易に排尿が可能です。



豊富なラインナップ

3種類（350,500,750mL）のサイズから選択できます。

※写真の350mLバッグはボタン付固定用ベルトを使用したものです。



滅菌済

滅菌済なので、安心して清潔にご使用頂けます。

逆流防止弁

バッグ内にフィルムバルブを内蔵し、尿が逆流しにくい構造にしました。

排尿口を収納可能

排尿チューブは折畳むことでコンパクトに収納できます。衣服を汚しにくく、衛生的に使用可能です。



品名	規格	品番	内容	滅菌	JANコード
クリニーレッグバッグ	350mL	001 380 0350	レッグバッグ 10枚入/箱 *	※滅菌済	4542187003543
	500mL	001 380 0500	固定用ベルト 10セット入/箱（幅13mm 長さ610mm）*		4542187003550
	750mL	001 380 0750	ボタン付固定用ベルト 1セット入/箱（未滅菌）		4542187003567
ボタン付固定用ベルト（別売り）	S(350mL用)	800 001 3685	1セット入/箱（幅25mm 長さ585mm）	未滅菌	4542187193541
	ML(500,750mL用)	800 001 3686			4542187193558