

RUSCHフローキャストウィック

RUSCHフローキャストウィックは、親水性コートが施された
ディスポーザブル型自己導尿用カテーテルです。



RUSCHフローキャストウィック

全長 20cm	Fr	製品番号	JANコード	側孔	入数
	08 ●	851221-000080	4026704335930		
	10 ●	851221-000100	4026704335947		
	12 ○	851221-000120	4026704335954	2孔	30
	14 ●	851221-000140	4026704335961		
	16 ●	851221-000160	4026704335978		

全長 40cm	Fr	製品番号	JANコード	側孔	入数
	08 ●	851241-000080	4026704336005		
	10 ●	851241-000100	4026704336012		
	12 ○	851241-000120	4026704336029	2孔	30
	14 ●	851241-000140	4026704336036		
	16 ●	851241-000160	4026704336043		

滅菌済み


親水性コートが施されたディスポーザブル型自己導尿用カテーテルです。

親水性コート




親水性コーティングにより摩擦を軽減し、尿道粘膜への負担による損傷リスクを軽減します。

■握るだけで、簡単潤滑化!

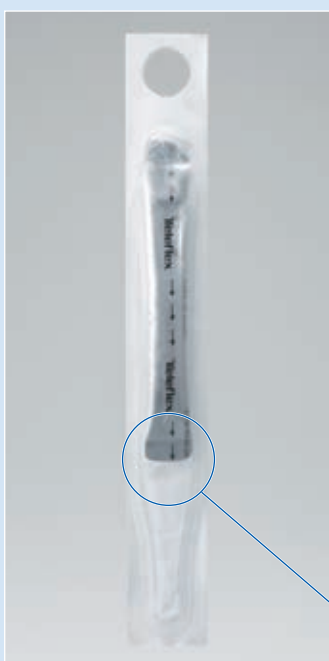

パッケージを開封せず、中の小袋を破袋するだけで、簡単に潤滑化することができます。

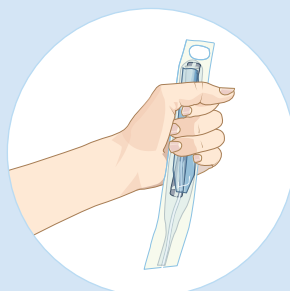

(補足:小袋を握り、袋が破けると、ウェット剤が流れ込みます。)

小袋はカテーテルに対して、上部にくるようにセットされています。

※ご使用前に、ご自身で予めカテーテルを潤滑化していただく必要がございます。

清潔な挿入



保護スリーブにより、チューブに直接触れないため、衛生的かつ、潤滑剤による指の滑りを軽減します。また、チューブに適度なコシを持たせることで、より安定した挿入性を実現します。

機能的な包装が取り出しをサポート



パッケージの裏の粘着テープで壁面や、トイレのタンクなどに貼付けて固定できます。また、パッケージの表のリングを片手で引っ張るだけで開封することができ、スムーズな取り出しをサポートします。

(総販売元)

 **クリエートメディック株式会社**
CREATE MEDIC

ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>

(製造販売元)

 **Teleflex**

テレフレックスメディカルジャパン株式会社